

宮ろうフェイスシールド 6型の作り方

宮城県立聴覚支援学校

準備するもの

- A4ラミネートシート（厚さ150ミクロン）
- ラミネートする機械
- すきまテープ（幅30mm 高さ20mmのものを使用）
- 手芸用ゴムベルト（幅2.5cm）
- ホチキス

(参考例)




①ラミネート加工

- ラミネートシートを何も挟まずに機械に挿入する。
入れる向きに注意！






②型紙作成

- 工作用紙などで作成すると良いでしょう。

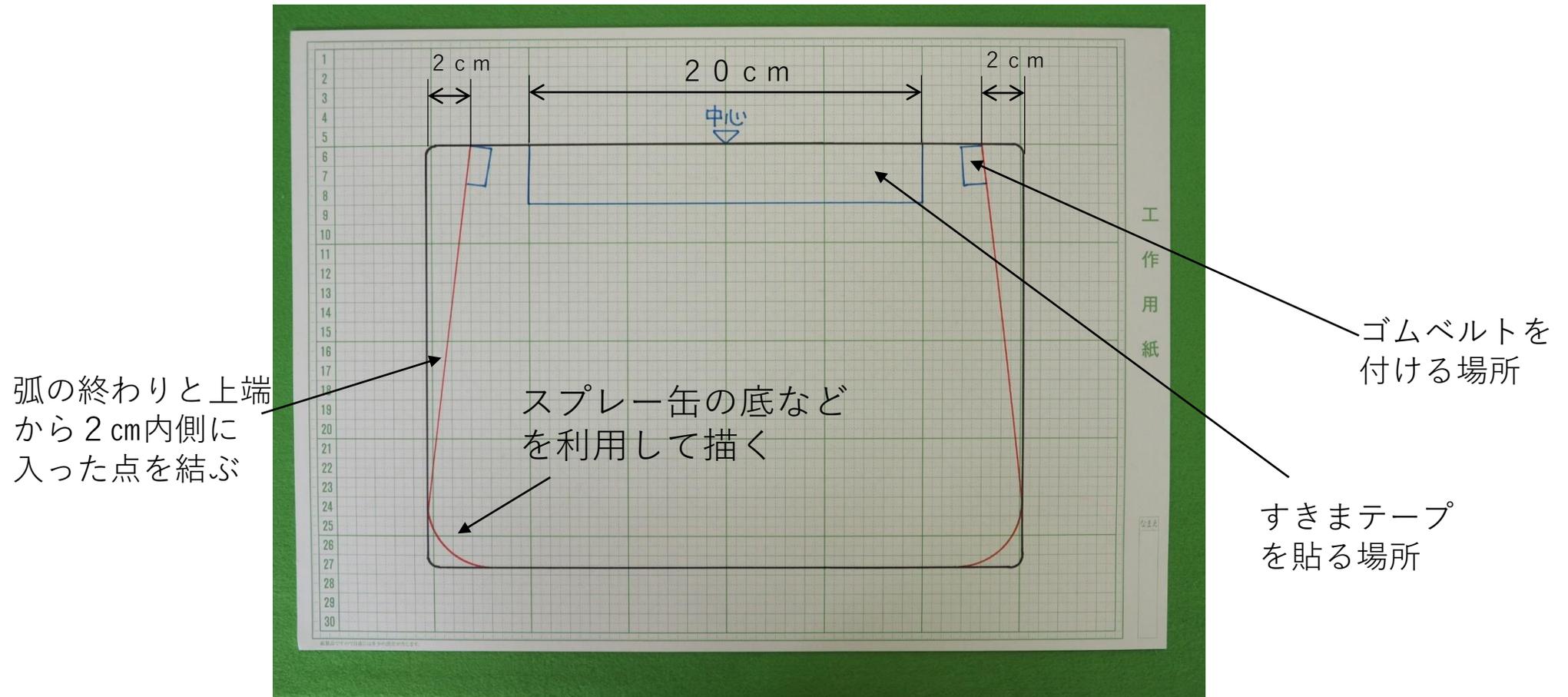


③ラミネートシートのカット

- 型紙とおりにA4のラミネートシートをカッターかはさみでカットする。

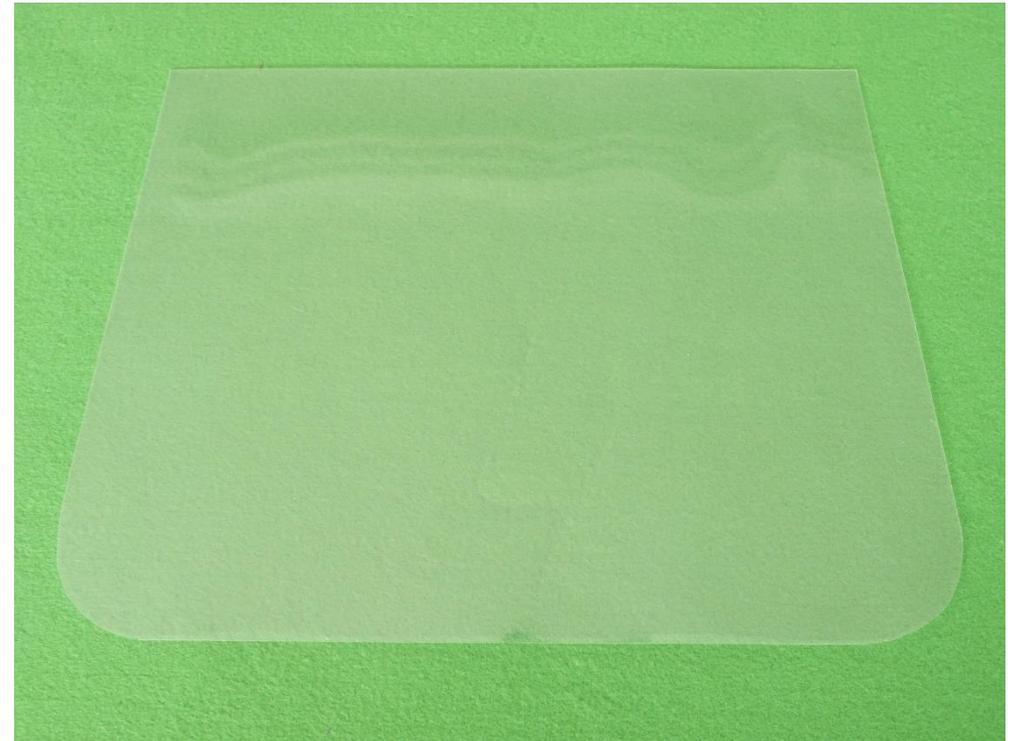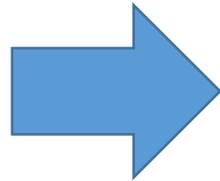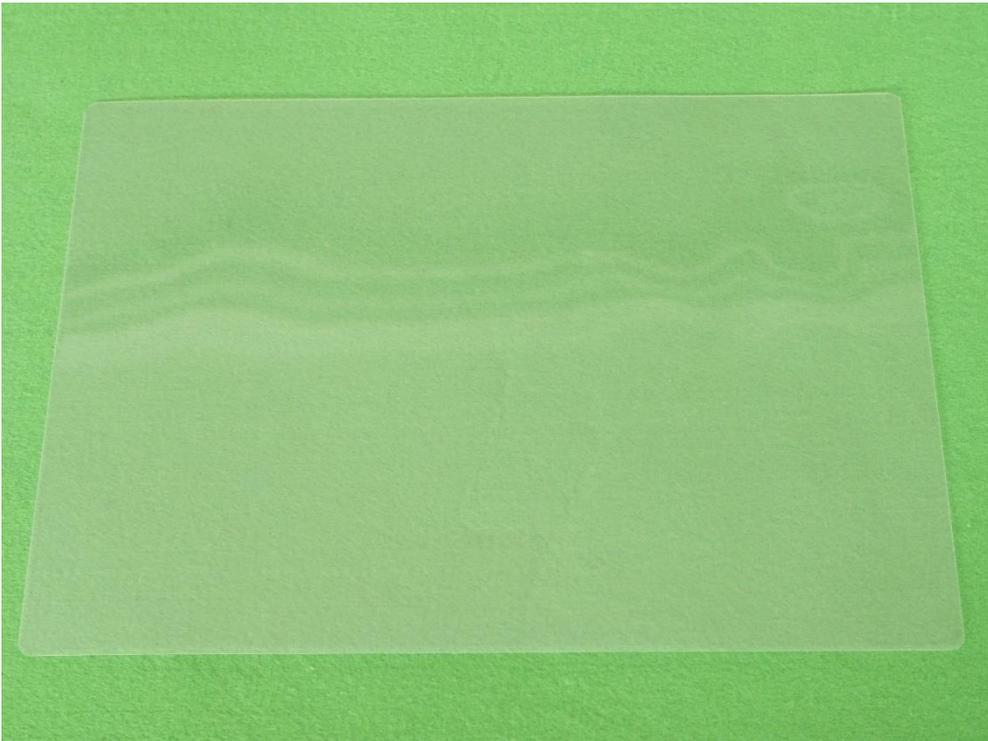


④すきまテープとゴムベルトのカット

- 以下の寸法でそれぞれカットする。

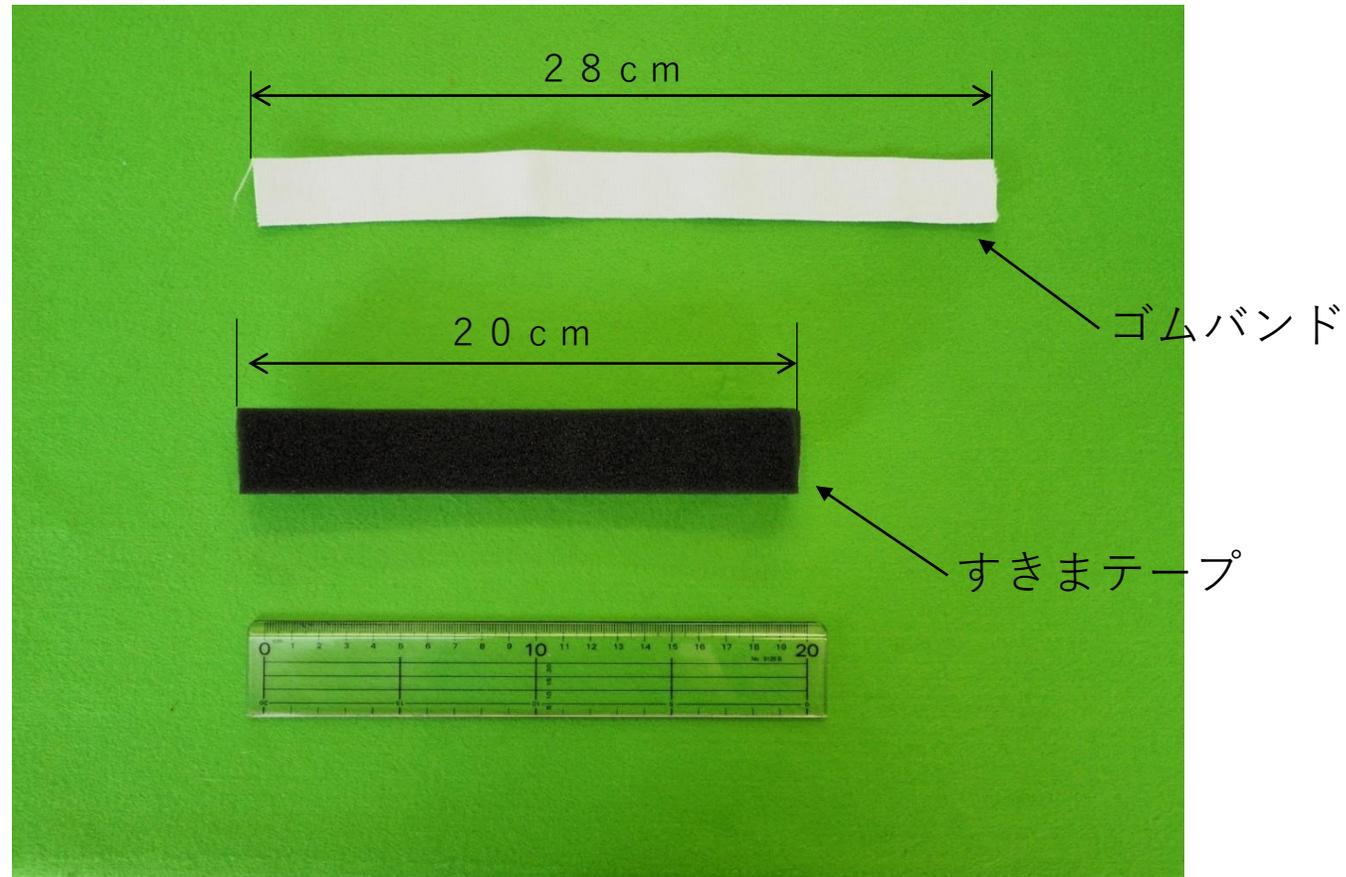



⑤すきまテープを貼る

- すきまテープをラミネートの上端に合わせ、型紙とおりに貼る。

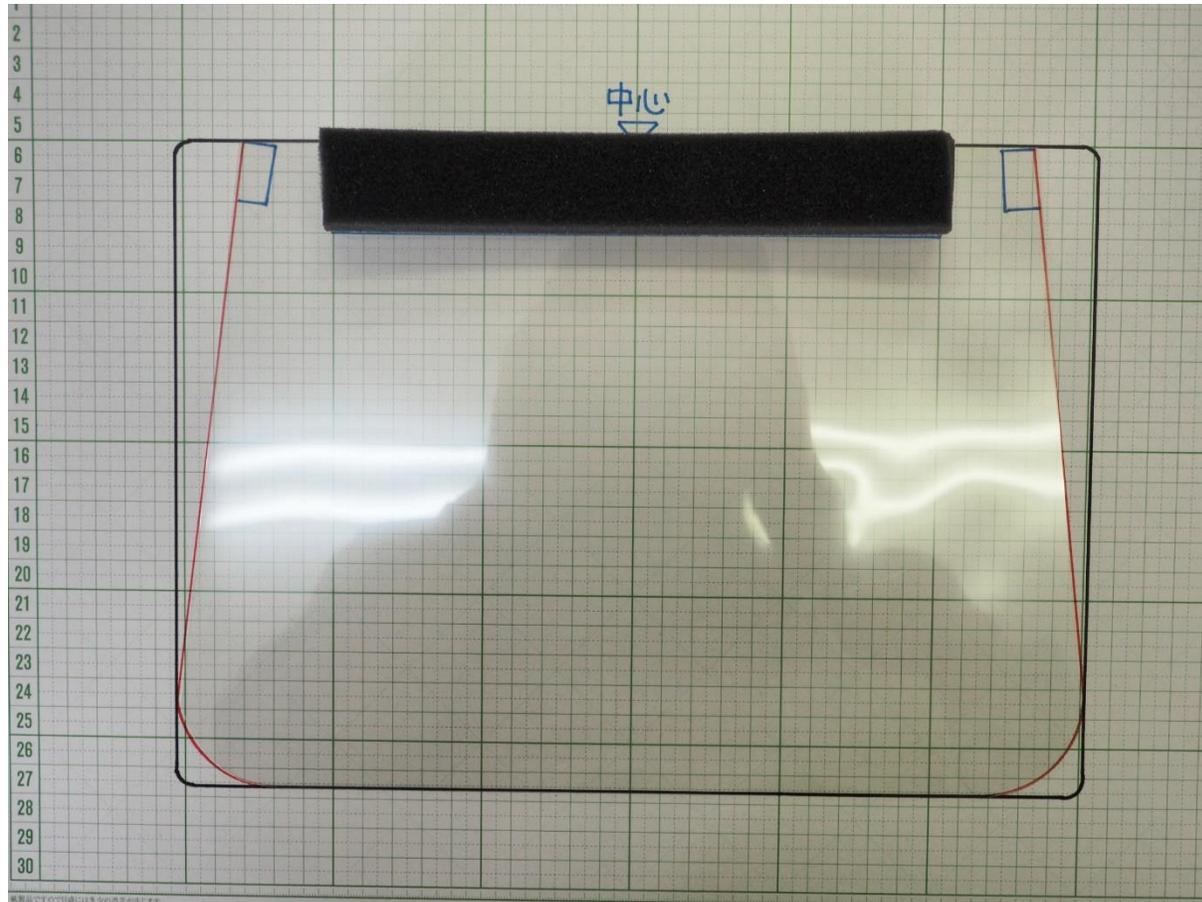


⑥ ゴムバンドの取り付け I

- ラミネートの端から 1 c m 入ったところにゴムバンドをラミネートの裏面（すきまテープを貼った面）に重ね、ホチキスの針が表に突き出るように 2 か所打つ。

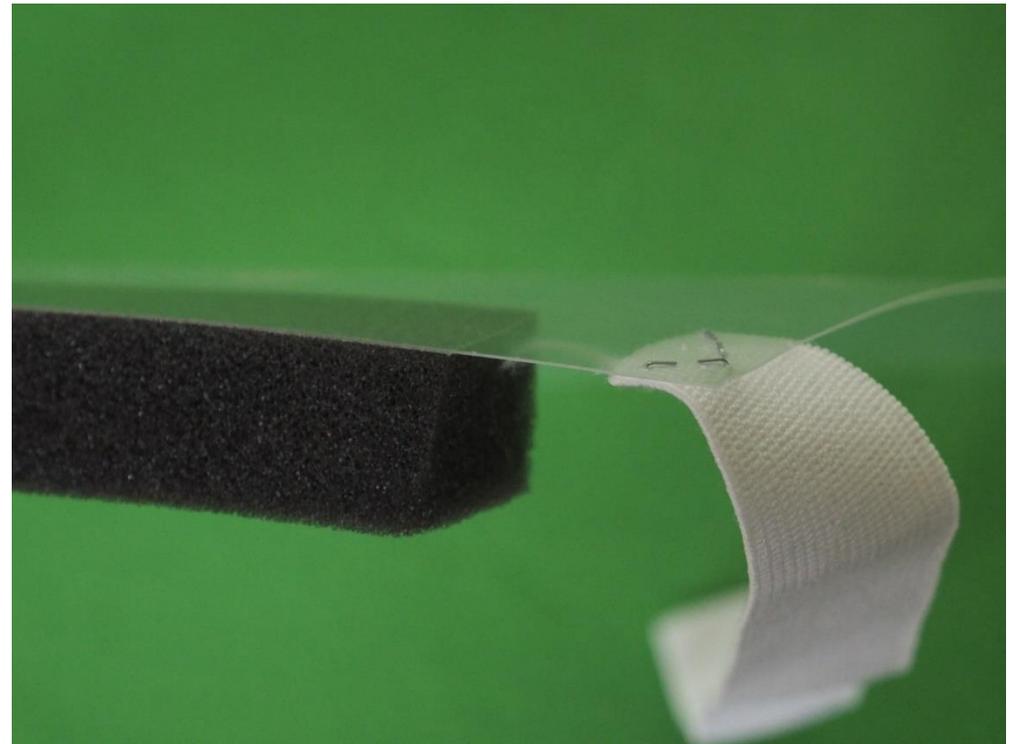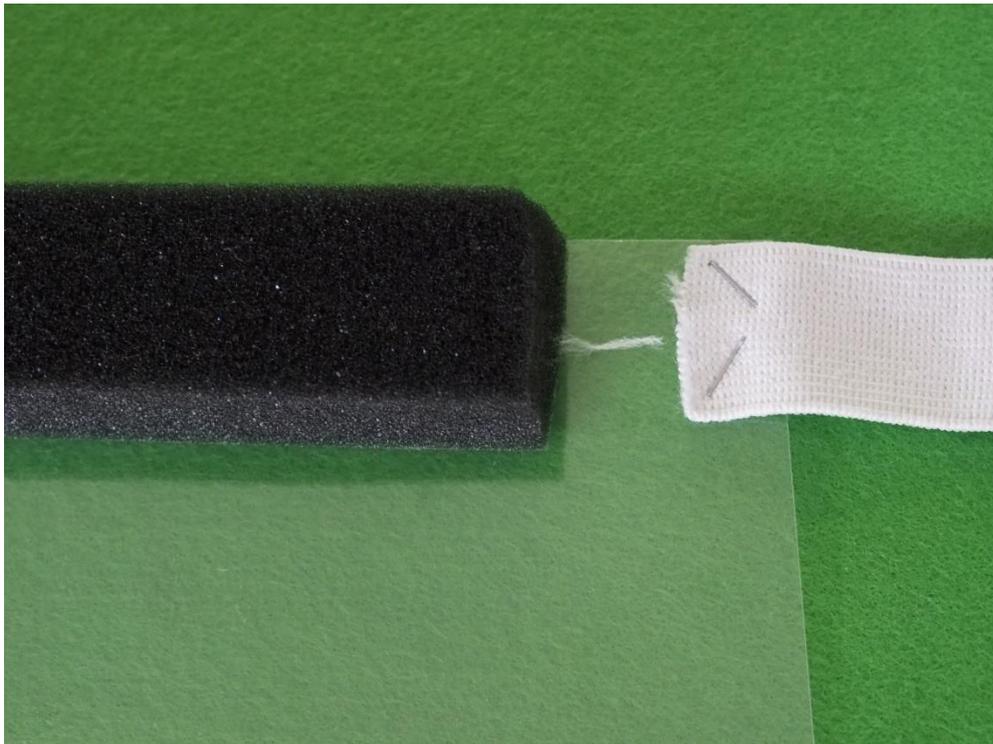

⑦ ゴムバンドの取り付け II

- ゴムバンドをもう片方の端に持っていき、同じくホチキスで止める。

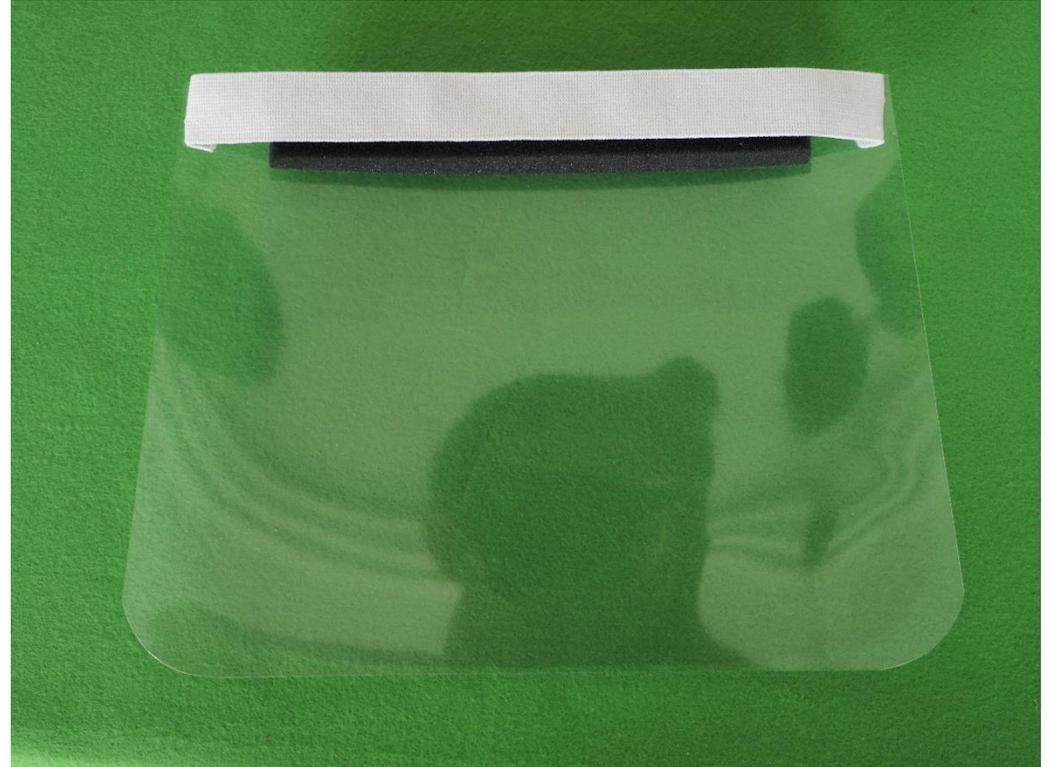

⑧完成

- ホチキスの針の部分にテープを貼って完成

